

**IKA®**

## Centrífuga IKA® mini G



**designed**  
to work perfectly

# IKA® mini G | Compacta pero potente!



IKA® presenta una nueva mini-centrífuga ideal para aplicaciones que no requieren velocidades muy elevadas, por ejemplo microfiltraciones y separación de células. La unidad tiene un diseño compacto y ocupa poco espacio en la mesa de trabajo. La cubierta transparente permite la observación constante y se puede utilizar tanto con microcentrífuga y tiras de tubos para PCR.

Datos Técnicos	IKA® mini G
Capacidad	8 x 2.0 ml
Densidad permitida	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
Aceleración centrífuga	2000 G
Energía cinética máx.	20 Nm
Potencia nominal de entrada / salida del motor	12 / 8 W
Velocidad fija	6000 rpm
Dirección de rotación reversible	no
Desviación de velocidad	5%
Temporizador	1 – 99 min
Pantalla de temporizador	LED de 7 segmentos
Tiempo de funcionamiento admisible	100%
Parada rápida	sí
Apertura de la cubierta	automática
Intercambio del rotor	sin herramientas
Dimensiones (An. x Prof. x Al.)	155 x 175 x 105 mm
Peso	1,4 kg
Temperatura ambiente admisible	5 – 40 °C
Humedad relativa admisible	80%
Tensión de CC	24 V
N.º ident. 0003958000	



## IKA+ Características especiales de seguridad

- > La centrífuga sólo funcionará con la tapa cerrada
- > La tapa se puede abrir fácilmente con solo pulsar un botón

## Características

- > Velocidad fija de 6000 rpm
- > Temporizador digital ajustable de 1 a 99 min
- > Parada rápida integrada
- > Arranque rápido de velocidad
- > Diseño compacto y funcionamiento silencioso
- > Rotor intercambiable sin herramientas
- > Manejo sencillo con el teclado táctil

## 3 Garantía de tres años\*

\* 2+1 años después de registrarse en [www.ika.com/register](http://www.ika.com/register)




Clase de protección conforme a DIN EN 60529: IP 30



## Accesorios incluidos

Rotor 8 x 1,5 / 2 ml	① N.º ident. 0003918500
Rotor de 4 tiras de 8 x 0,2 ml	② N.º ident. 0004531300
Juego de adaptadores de 0,5 ml x 8	③ N.º ident. 0004470900
Juego de adaptadores de 0,4 ml x 8	④ N.º ident. 0004470901
Juego de adaptadores de 0,2 ml x 8	⑤ N.º ident. 0004470902

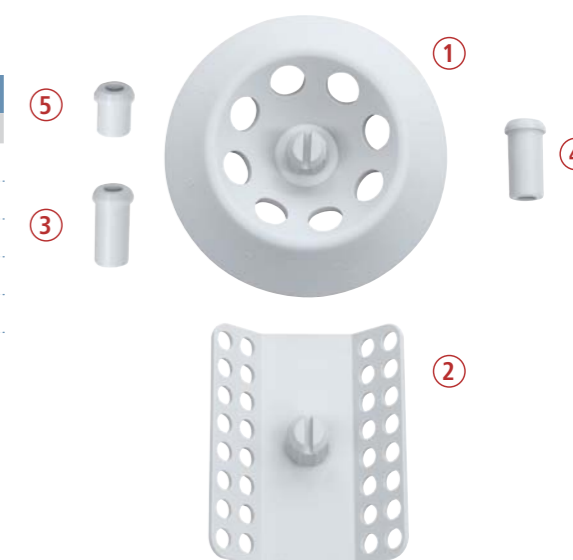

Sujeto a cambios técnicos  
Las indicaciones no son vinculantes  
para la entrega

**IKA®+**

**Los pedidos ahora son  
más fáciles!**

Si desea más información  
sobre nuestros productos y  
hacer un pedido, visite:

[www.ika.com](http://www.ika.com)

201505\_Centrifuge\_Brochure\_ES\_wop

## Preguntas frecuentes

### **Ofrece IKA® un rotor para tiras de tubos PCR?**

Sí, la IKA® mini G incluye un rotor para cuatro tiras de 8 x 0,2 ml

### **Cuál es la energía cinética máxima que admite la IKA® mini G?**

La energía cinética máxima es de 20 Nm

### **Qué ocurre cuando se abre la tapa de la centrifuga?**

La centrifuga se detiene de inmediato

### **Qué herramienta se necesita para cambiar el rotor?**

El rotor se puede cambiar sin ninguna herramienta

### **Hay un temporizador en la IKA® mini G?**

Sí, el temporizador se puede ajustar de 1 a 99 min

### **Cuál es la aceleración centrífuga de la IKA® mini G?**

La aceleración centrífuga de la IKA® mini G es de 2000 G

### **Tiene la IKA® mini G una pantalla digital?**

Sí, la IKA® mini G tiene un temporizador LED de 7 segmentos integrado

### **Es posible cambiar la velocidad?**

No, la velocidad está fijada en 6000 rpm



[www.facebook.com/IKAworldwide](http://www.facebook.com/IKAworldwide)

IKA®-Werke GmbH & Co. KG  
Janke & Kunkel-Str. 10  
79219 Staufen  
Germany

Tel. +49 7633 831-0  
Fax +49 7633 831-98

[sales@ika.de](mailto:sales@ika.de)  
[www.ika.com](http://www.ika.com)