

IKA®

遠心分離機 IKA® mini G



designed
to work perfectly

IKA® mini G | コンパクトかつ、パワフル!



小型遠心分離機 mini G が新登場。超高速回転を必要としないサンプルの作業に最適。設置面積が小さい、コンパクトなデザイン。透明なフードを採用している為、サンプルの分離状態を目で確認出来ます。PCR 容器、PCR ストリップスを本機で使用可能。

技術仕様	
最大処理容量	8 x 2.0 ml
許容密度	1.2 kg / dm ³
最大遠心加速度	2000 G
最大運動エネルギー	20 Nm
モーター入力/出力	12 / 8 W
回転数(固定)	6000 rpm
逆回転機能	無し
回転数偏差	5%
タイマー	1-99 分
タイマー表示	7 セグメント LED
許容作動持続時間	100%
クイックストップ	可
フタの開閉	プッシュボタン式(閉める時は手動)
ローター交換	工具不要
外形寸法(WxDxH)	155 x 175 x 105 mm
重量	1.4 kg
許容周囲温度	5-40 °C
許容周囲湿度	80%
直流電圧	24 V

IKA® mini G	
最大処理容量	8 x 2.0 ml
許容密度	1.2 kg / dm ³
最大遠心加速度	2000 G
最大運動エネルギー	20 Nm
モーター入力/出力	12 / 8 W
回転数(固定)	6000 rpm
逆回転機能	無し
回転数偏差	5%
タイマー	1-99 分
タイマー表示	7 セグメント LED
許容作動持続時間	100%
クイックストップ	可
フタの開閉	プッシュボタン式(閉める時は手動)
ローター交換	工具不要
外形寸法(WxDxH)	155 x 175 x 105 mm
重量	1.4 kg
許容周囲温度	5-40 °C
許容周囲湿度	80%
直流電圧	24 V

Ident. No. 3958000



特徴

- > 回転数: 6000 rpm (固定)
- > タイマー設定範囲: 1~99分
- > 作動終了後、素早く停止
- > スムーズに最高回転速度に到達
- > コンパクトで、静かな作動
- > 工具無しで、ローターを交換可能
- > タッチキー採用で、操作性抜群

安全機能

- > フタが閉められた状態でないと、作動しません。
- > フタはボタン1つで簡単に開きます。

3年保証*

* 通常2年保証ですが、ウェブ登録頂くと3年保証。
登録はこちらのサイトから
www.ika.com/register



タイマー調節可能



静かな作動



安全機能搭載



クイックストップ機能



工具無しで、ローター(アクセサリ)交換可能




タッチキー採用で、操作性抜群



付属アクセサリ

ローター8 x 1.5 / 2 ml	①	Ident. No. 3918500
ローター4 x ストリップ 8 x 0.2 ml	②	Ident. No. 4531300
アダプターセット 0.5 ml x 8	③	Ident. No. 4470900
アダプターセット 0.4 ml x 8	④	Ident. No. 4470901
アダプターセット 0.2 ml x 8	⑤	Ident. No. 4470902

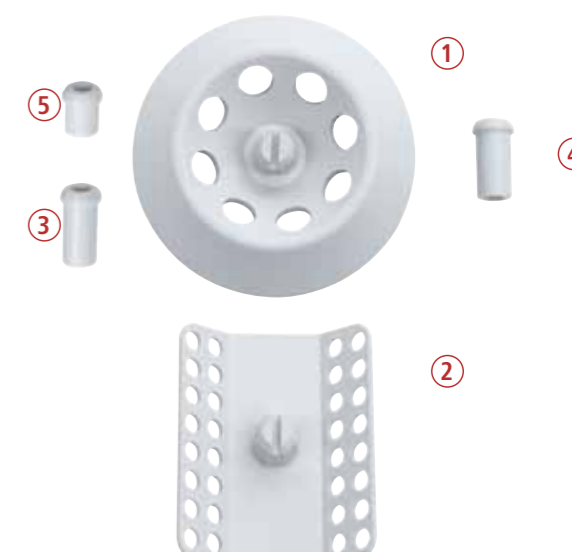

DIN EN 60529; IP 30 の保護クラスに準拠。



テクニカルデータは予告なく
変更されることがあります。

IKA®+

ご注文は簡単!

製品の詳細と、ご注文
方法は下記ウェブサイト
をご参考下さい。

www.ika.com

201505_Centrifuge_Brochure_IWN_JP_wop

お問い合わせの 多いご質問

**PCR ストリップチューブ用アクセサリは
提供していますか?**

はい、ご購入時に 4 ストリップ 8 × 0.2 ml 用の
アクセサリが付属しています。

最大運動エネルギーはどれくらいですか?

IKA® mini G の最大運動エネルギーは、20 Nm
です。

**作動中にフードが開いてしまうと、どうなりま
すか?**

作動中にフードが開くと、素早く停止する安全
設計です。

ローターを交換するのに工具は必要ですか?

工具無しで、ローターを交換できます。

タイマー機能はついていますか?

はい、タイマーの設定範囲は1~99分です。

IKA® mini G の遠心加速度はどれくらいですか?

遠心加速度は 2000 G です。

タイマーはデジタル表示ですか?

はい、LED でタイマー表示します。

回転数を調整することは可能ですか?

回転数の調節は出来ません。
(6000 rpm 固定)



www.facebook.com/IKAworldwide

IKA® ジャパン株式会社
大阪府東大阪市横沼町3-5-8
Osaka 577-0808
Japan

Tel. +81-6-6730-6781
Fax +81-6-6730-6782

info_japan@ika.ne.jp
www.ika-japan.com